

HEADEAZ COOLING HEADBAND

Cold therapy for headache



Swedish Posture®



DK/NO Et blødt pandebånd med kuldeterapi mod hovedpine og migræne. HeadEaz hjælper dig med at slappe af, helbreder og frigør spændinger. Hovedbåndet bæres således at det dækker øjnene for at hovedet opnår hvile fra eksternt lys og eksterne indtryk. Hovedbåndet kan bruges selvkølet eller frosset for at give en koldere oplevelse.

Kuldeterapi får blodkarrene til at trække sig sammen, og derved falder blodgennemstrømningen, hvilket reducerer hævelse og modvirker betændelse.

- Anvend hovedbåndet når du oplever hovedsmerter, migræne, træthed, stress eller spændinger.
- Køleeffekten forsvinder efter 15 minutter. Behold hovedbåndet på som kompression, eller lad det selvkøle i 30 minutter eller afkøl det atter i fryseren.
- Anbringes i fryseren (ca. 2 timer) for at opnå en koldere effekt. Brug det frosne hovedbånd i maksimalt 15 minutter på bar hud.
- Opbevar HeadEaz i den medfølgende plastikpose for at opretholde dens kølefunktion.
- Brug en fugtig klud til rengøring. Læg det fladt ned og lad det lufttørre.



Materiale: Stof: Lycra 100%, Gel: Glycerol 60%, Vand 26%, Natriumacrylat 14%

Unisex

Farver

One-Size

Sort



Støtte



Helbredende



15 minutters
kølede behandling

Produceret i Kina

Inspirera & Co AB/
Swedish Posture
Katarinavägen 15
116 45 Stockholm
Sweden

Simply good posture.

Swedish Posture

swedishposture.com

SE Kylbehandling av huvudvärk och migrän. HeadEaz, med sin svalkande känsla, hjälper dig att slappna av, släppa på spänningar, minska stress och för att återhämta dig. Använd huvudbandet över ögonen för att stänga ute intryck och stress för både ögon och huvud. HeadEaz kan användas självkyld eller fryst för en kallare upplevelse.

Kyla gör att blodkärlen drar ihop sig och genomblödningen minskar, vilket minskar svullnader och motverkar inflammationer.

- Använd vid huvudvärk, migrän, stress, spänningar, trötthet och utmattning.
- Kyleffekten varar ca 15 minuter. Frys igen eller behåll HeadEaz på.
- Lägg i frysen (ca 2 timmar) för en kallare effekt. Använd HeadEaz fryst i max 15 minuter på bar hud.
- Förvara alltid HeadEaz i den medföljande påsen mellan användning för att behålla funktionen.
- Använd en fuktig trasa för att torka rent. Låt lufttorka.



Material: Tyg: Lycra 100%, Gel: Glycerol 60%, Vatten 26%, Natriumakrylat 14%

Unisex Färg
One-Size Svart



Kylbehandling
15 minuter

Tillverkad i Kina

EN A soft headband with cold therapy for headache and migraine. HeadEaz helps you to relax, recover and release tension. Wear over the eyes to rest the head from external light and impressions. The head band can be used self-cooled or freezed for a colder experience.

Cold therapy makes the blood vessels contract and blood flow decrease, which reduces swelling and counteracts inflammation.

- Use when experiencing headache, migraine, fatigue, stress or tension.
- When wearing the headband, the cooling effect lasts for about 15 minutes.
- Keep the headband on or remove it to self-cool for 30 minutes.
- For a colder effect place HeadEaz in the freezer (about 2 hours). Use the freezed headband maximum 15 minutes on bare skin.
- Always keep HeadEaz in the enclosed plastic bag. If not, the headband loses its function and softness.
- Use damp cloth to wipe it clean. Lay flat and air dry.



Material: Fabric: Lycra 100%, Gel: Glycerol 60%, Water 26%, Sodium Acrylate 14%

Unisex Colour
One-Size Black



Cooling treatment
15 minutes

Made in China

DE Ein weiches Stirnband für Kältetherapie gegen Kopfschmerzen und Migräne. HeadEaz hilft Ihnen, sich zu entspannen, zu erholen und Spannungen abzubauen. Tragen Sie es über den Augen, um den Kopf vor Licht und Eindrücken von außen zu schützen. Das Stirnband kann selbstgeköhlt oder gefroren für ein kälteres Erlebnis verwendet werden.


Die Kältetherapie bewirkt, dass sich die Blutgefäße zusammenziehen und die Durchblutung abnimmt, was Schwellungen reduziert und Entzündungen entgegenwirkt.

- Verwenden Sie es bei Kopfschmerzen, Migräne, Müdigkeit, Stress und Anspannung.
- Die kühlende Wirkung verschwindet nach 15 Minuten. Lassen Sie das Stirnband zum Komprimieren an oder lassen Sie sie 30 Minuten lang selbst abkühlen oder kühlen Sie sie im Gefrierschrank wieder ab.
- Legen Sie sie in den Gefrierschrank (ca. 2 Stunden), um sie kälter zu machen. Verwenden Sie das gefrorene Stirnband maximal 15 Minuten auf nackter Haut.
- Bewahren Sie HeadEaz in der beiliegenden Plastiktüte auf, um seine Kühlfunktion zu erhalten.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um es abzuwischen. Flach hinlegen und an der Luft trocknen lassen.



Material: Stoff: Lycra 100 %, Gel: Glycerin 60 %, Wasser 26 %, Natriumacrylat 14 %

Unisex Farbe
One-Size Schwarz

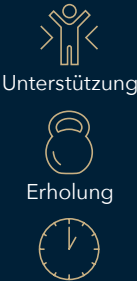

Kühlbehandlung
15 Minuten

In China hergestellt

FR Un bandeau souple avec thérapie par le froid pour les maux de tête et migraine. HeadEaz vous aide à vous relaxer, à récupérer et relâcher les tensions. Portez-le par-dessus vos yeux pour vous reposer des lumières extérieurs. Le bandeau peut être utilisé auto-refroidi ou geler pour une expérience plus fraîche.

La thérapie par le froid provoque une contraction des vaisseaux sanguins et réduit le débit sanguin, ce qui réduit les gonflements et neutralise l'inflammation.

- Utilisez lorsque vous ressentez maux de tête, migraine, fatigue, stress ou tension.
- L'effet refroidissant disparaît après 15 minutes. Gardez le bandeau sur vous pour l'effet compressant ou laissez-le refroidir pendant 30 minutes ou refroidissez-le dans le congélateur.
- Placez dans le congélateur (environ 2 heures) pour un effet plus frais. Utilisez le bandeau gelé maximum 15 minutes sur la peau nue.
- Stockez le HeadEaz dans un sac plastique fermé pour préserver sa fonction de refroidissement.
- Utilisez un chiffon humide pour le nettoyer. Posez à plat et laissez sécher.



Matière : Tissu : Lycra 100 %, Gel : Glycérol 60 %, Eau 26 %, Acrylate de sodium 14 %

Unisex Couleur
One-Size Noir



Traitement de
refroidissement
15 minutes

Fabriqu  en Chine